

PRYSM iO™

USER'S MANUAL AND DECLARATION OF CONFORMITY



PRYSM iO™

GEBRAUCHSANLEITUNG UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wirklich intelligente Wellness

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTÜBERSICHT 50

INHALT 50

PRYSM IO™ KENNENLERNEN 51

STARTE DEINE PRYSM IO™ JOURNEY 51

VOR DEM SCAN 52

SO FUNKTIONIERT DAS SCANNEN 52

PROFI-TIPPS 53

DEIN PRYSM SCORE 54

SICHERHEITSANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE 54

VORSICHTSMASSNAHMEN 56

WARTUNG 57

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND RECHTLICHE INFORMATIONEN 60

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 61

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN 62

PRODUKTÜBERSICHT


Willkommen bei Prysm iO™ – deinem persönlichen Zugang zu intelligenter, wissenschaftlich fundierter Wellness. Prysm iO™ misst den Carotinoid-Gehalt deiner Haut.

Prysm iO™ bringt Licht ins Dunkel und liefert dir deinen personalisierten Haut-Carotinoid-Score (Prysm Score), mit dem du einen klareren Einblick in deine täglichen Wellness-Gewohnheiten zu gewinnen und deine Bemühungen in Erkenntnisse verwandeln kannst. Dieses Handbuch führt dich durch alles, was du wissen musst, um das Beste aus deinem Prysm iO™ herauszuholen – damit du mit deiner Wellness-Journey in Verbindung bleiben können.

INHALT

1. Prysm iO™ Gerät
2. Prysm iO™ Ständer
3. Reiseetui
4. Kalibrierungsscheibe
5. Mikrofaser-Reinigungstuch
6. USB-C-Ladekabel
7. Kurzanleitung

PRYSM IO™ KENNENLERNEN

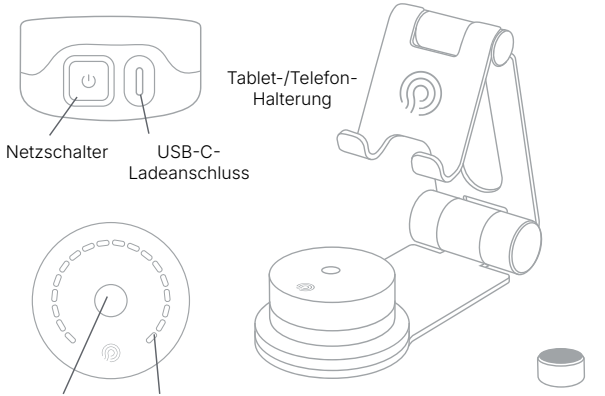

STARTE DEINE PRYSM IO™ JOURNEY

DOWNLOAD DER NU SKIN® Prysm iO™ APP

Bevor du dein Gerät verwendest, lade die Nu Skin® Prysm iO™ App herunter und folge den Anweisungen in der App, um dein Gerät einzurichten und zu kalibrieren. Diese leistungsstarke Kombination erschließt das gesamte Prysm iO™-Erlebnis. Du kannst dein Gerät mühelos einrichten und Einblicke für ein intelligenteres, personalisiertes Wohlbefinden gewinnen.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

VOR DEM SCAN

Bevor du dein Prysm iO™ verwendest, musst du dein Gerät anschließen und einrichten.

Schritt 1:

Lade die Nu Skin® Prysm iO™ App herunter.

Schritt 2:

Schalte dein Gerät ein. Die Anzeigeleuchten blinken weiß und zeigen an, dass du den Anweisungen in der App folgen musst, um dein Gerät zu verbinden und einzurichten.

Schritt 3:

Folge den Anweisungen in der App, um dein Gerät mithilfe der mitgelieferten Kalibrierungsscheibe zu kalibrieren.

SO FUNKTIONIERT DAS SCANNEN

Stelle vor der Verwendung sicher, dass das Prysm iO™ Gerät aufgeladen ist. Anweisungen zum Aufladen findest du auf Seite X.

Schritt 1:

Schalte das Gerät über die Einschalttaste ein. Ein rotes Licht in der Mitte des Geräts blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät zum Scannen bereit ist.

Schritt 2:

Lege deinen Zeigefinger so auf das Gerät, dass die gesamte Linse bedeckt ist. Der Scanvorgang wird automatisch gestartet.

Hinweis: Achte darauf, dass du deinen Finger während des Scans nicht von der Linse nimmst.

Schritt 3:

Die Anzeigeleuchten kreisen während des Scans.

Anschließend blinkt ein einzelnes Licht und zeigt den Score an.

Schritt 4

Die Anzeigeleuchten zeigen einige Sekunden lang deinen Farbwert an, bevor sie sich ausschalten. Das Gerät ist nun bereit, einen weiteren Scan durchzuführen.

Hinweis: Wenn innerhalb von 1 Minute kein neuer Scanvorgang gestartet wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.Profi-Tipps

PROFI-TIPPS



Profi-Tipp 1:

Versuche, das Objektiv des Geräts mit dem unteren Teil deines Fingers zu bedecken.



Profi-Tipp 2:

Um Bewegungen während des Scans zu vermeiden, lege deinen Arm auf eine flache Oberfläche.

DEIN PRYSM SCORE

Der Prysm Score spiegelt den Carotinoid-Gehalt deiner Haut wider. Das Gerät zeigt einen farbbasierten Score und gibt bei Verbindung mit der Nu Skin® Prysm iO™ App den entsprechenden Zahlenwert an.

Rot bedeutet einen niedrigeren Carotinoid-Spiegel der Haut



Lila bedeutet einen höheren Carotinoid-Spiegel der Haut

SICHERHEITSANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE

- Das Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene über 18 Jahren bestimmt. Es ist nicht für Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung für die sichere Anwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die anwenderseitige Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern vorgenommen werden. Verwende dieses Gerät nur gemäß den Anweisungen in den zugelassenen Schulungsunterlagen von Nu Skin®.
- Vermeide es, direkt in die Linse des Geräts zu schauen, wenn es einen Scanvorgang durchführt.
- Versuche nicht, den Akku auszutauschen oder das Gerät zu öffnen.

- Nimm das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Bewahre es außerhalb der Reichweite von Haustieren auf.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen; es darf nicht im Freien verwendet werden.
- Das Gerät sollte in Innenräumen und an gut belüfteten, trockenen Orten aufgeladen werden.
- Lasse das Gerät nicht länger als eine Stunde aufladen, nachdem der Akku schon vollständig geladen ist. Der Akku verfügt über Systeme zur Vermeidung von Überhitzung, aber eine Überladung kann die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit verkürzen.
- Das Gerät darf nicht zerdrückt, fallengelassen oder beschädigt werden.
- Lasse das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Prysm iO™ enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät keiner Hitze ausgesetzt werden. Niemals in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Heizung, offenem Feuer oder eines Wärmeabzugs lagern. Lassen Sie das Gerät nicht in einem heißen Fahrzeug liegen und lagern Sie es nicht an übermäßig heißen Orten. Lassen Sie das Gerät nicht in einer kalten oder gefrierenden Umgebung liegen. Vor dem Versand des Geräts ist der Paketdienstleister oder vor der Mitnahme an Bord eines Flugzeugs die Luftfahrtgesellschaft zu konsultieren.
- Verwende das Gerät nur zum Scannen deiner Fingerspitze. Versuche nicht, andere Körperteile oder Gegenstände damit zu scannen.

WARNUNG: Das Prysm iO™ Gerät wird über ein Typ-C-USB-Kabel mit zertifiziertem USB-fähigem Adapter geladen.

Verwende nur ein qualitativ hochwertiges Typ-C-USB-Kabel mit den folgenden Werten: 5V 1A.

Idealerweise wird das Gerät bei Raumtemperatur zwischen 20 °C und 25 °C (68 °F bis 77 °F) gelagert und aufgeladen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahre das Gerät und das Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Untersuche das Gerät regelmäßig auf Schäden. Nimm das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wende es nur nach Anweisung auf gesunder Haut an. Verwende es nicht, wenn du offene Wunden oder Ausschläge hast, zu Pityriasis rosea neigst oder wenn du problematische oder übermäßig empfindliche Haut an den Fingern hast.
- Verwende das Gerät nicht beim Autofahren, beim Bedienen von Maschinen oder bei anderen Aktivitäten, bei denen ein Scan ein Verletzungsrisiko darstellen kann.
- Das Gerät darf nicht mit scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln gereinigt werden.
- Nutze es nicht während des Badens oder Duschens. Tauche dein Gerät nicht in Wasser ein.
- Lege dein Gerät nicht so ab, dass es herunterfallen oder ins Wasser fallen kann.
- Nimm keine Veränderungen am Gerät vor.

Prysm iO™ verwendet Funksignale, um sich mit drahtlosen Netzwerken zu verbinden, und Prysm iO™ enthält Magnete, die elektromagnetische Felder aussenden. Solche Emissionen können den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen oder medizinische Geräte stören. Wende dich an deinen Arzt und den Hersteller

des medizinischen Geräts, um zu erfahren, ob du einen Sicherheitsabstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem Prysm iO™ oder dem Magnetständer einhalten musst.

Beste Praktiken für genaue Scans

- Der Prysm iO™ sollte beim Scannen auf einer flachen, ebenen Oberfläche stehen.
- Achte darauf, dass dein Finger vor dem Scannen sauber und trocken ist.
- Lege die Mitte der Fingerkuppe so nah wie möglich an die Mitte der Scanlinse.
- Vergewissere dich, dass dein Finger die Linse vollständig bedeckt, um jegliches Fremdlicht während des Scannens zu blockieren.
- Vermeide Bewegungen während des Scans.

WARTUNG

Damit dein Prysm iO™ Gerät ordnungsgemäß funktioniert, befolge diese wichtigen Anweisungen.

Reinigung des Geräts

Reinige das Gerät nach jedem Scanvorgang mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch, und halte das Glasfenster stets frei von Partikeln, Rückständen und Flecken.

Falls eine zusätzliche Reinigung erforderlich ist, wische mit 70%igem Isopropylalkohol auf einem weichen Tuch oder Papier nach. Tauche das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und halte es nicht unter fließendes Wasser. Vermeide scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten.

Aufbewahrung

Bewahre das Gerät in der mitgelieferten Reisetasche oder an einem sicheren Ort auf, um es zu schützen und in optimalem Zustand zu halten. Bei unsachgemäßer Lagerung kann die Abtastlinse beschädigt werden.

Temperatur

Benutze und lade das Gerät nur an einem kühlen, trockenen Ort zwischen 20 °C und 25 °C (68 °F bis 77 °F). Bewahre das Gerät nur in Umgebungen zwischen 10 °C und 27 °C (50 °F bis 80 °F) auf.

Aufladen

Wenn der Akku des Geräts schwach ist, blinkt die erste rote Kontrollleuchte dreimal. Vergewissere dich vor dem Aufladen, dass das Gerät und das Ladegerät vollständig trocken sind. Lade das Gerät nicht an Orten auf, an denen es mit Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.



Stecke das mitgelieferte Kabel in einen Adapter und dann in eine Steckdose. Stecken Sie dann das andere Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss des Geräts.



Vorsicht: Lass das Gerät nicht eingesteckt, wenn es vollständig aufgeladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Kontinuierliches Laden kann den Akku im Laufe der Zeit beschädigen. Verwende nur das mitgelieferte Prysm iO™ Ladekabel und einen zertifizierten (IEC/EN 62368-1) USB-C-fähigen Adapter. Troubleshooting.

Fehlersuche

Informationen zur Fehlerbehebung des Prysm iO™ findest du unter: getprysmio.com/support

Wartung

Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dadurch erlischt jegliche Gewährleistung. Das Gerät enthält keine vom Anwender wartbaren Teile. Für die Wartung beachte bitte den Abschnitt „Garantie“.

Geräte- und Batterieentsorgung



Der Prysm iO™ muss ordnungsgemäß unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften entsorgt werden. Das Gerät enthält elektronische Bauteile und einen Lithium-Ionen-Akku, der getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wende dich an deine örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um dich über die ordnungsgemäße Entsorgung und die Recyclingmöglichkeiten für Elektronikgeräte mit Lithiumbatterien in deiner Region zu informieren.

INFORMATIONEN ZUM UMTAUSCH UND ZUR GARANTIE

Nu Skin® garantiert, dass das Gerät während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren Mängel auftreten, ist der zuständige Nu Skin® Kundenservice zu kontaktieren, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Bitte den Lieferschein aufbewahren, da er eventuell vorgelegt werden muss. Nu Skin® behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf deine Rechte in dem Land, in dem du das Gerät gekauft hast – diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Informationen

darüber, wie Nu Skin® persönliche Daten sammelt, verwendet und weitergibt, findest du unter **https://legal.nuskin.com/privacy.html**,

und Informationen darüber, wie Nu Skin® Gesundheitsdaten von Verbrauchern erhebt und verwendet, findest du unter: https://legal.nuskin.com/privacy.html#consumer-health-data-privacy-policy

Der App Store und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Märkten eingetragen. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Wichtiger Hinweis: Prysm iO™ ist kein Medizinprodukt und sollte nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung verwendet werden. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Beschwerden zu diagnostizieren, zu heilen, zu lindern, zu behandeln oder ihnen vorzubeugen, oder die Struktur und Funktion eines Körperteils zu beeinflussen. Ziehe immer zuerst einen medizinischen Betreuer zurate, bevor du Entscheidungen triffst, die deine Gesundheit oder dein Wohlbefinden betreffen. Wenn du glaubst, dass Prysm iO™ oder der Ständer ein medizinisches Gerät beeinträchtigen könnte, stelle die Anwendung sofort ein und wende dich an deinen Arzt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

Radio-Typ	Beschreibung	**Senderfrequenz (MHz)**	**Maximale Strahlungsleistung EIRP**
Bluetooth	Wenig Energie	2402 – 2480	1,72 dBm

Prysm iO™ Gerätemodell: PD1R

Eingangsspannung: 5V ⎓ 1A, 5W

Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7V 360mAh

Schutz gegen Eindringen (IP) Bewertung: IP54

Geschützt gegen begrenztes Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen.

Relative Luftfeuchtigkeit: 10~95% RH

Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Maximale Betriebshöhe: 2.000 Meter.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

	Halte dich beim Entsorgen des Akkus an die örtlich geltenden Vorschriften
	Gleichstrom
	Klasse III Schutz gegen elektrischen Schlag
	Trocken halten
	Handbuch vor Gebrauch lesen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

NU SKIN
ARTISTRY THAT WORKS WITH SCIENCE™

EU-Konformitätserklärung (DoC)

CE

WIR, NSE Products Europe BV, mit Hauptgeschäftssitz in De Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Prysm ID
Modell PD1R

5V ⎓ 1A, 5W, IP54

Li-Ionen-Akku-betriebenes Gerät
3,7 V, 360 mAh

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union steht: Funkgeräterichtlinie (2014/53/EU), RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung (EU) 2015/863.

die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3.1(a) der Funkgeräterichtlinie)

- **EN 62479: 2010**
- **EN 50663: 2017**
- **EN 61010-1: 2010**
- **EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04**
- **EN 61010-1:2010/A1:2019**

Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1(b) der Funkgeräterichtlinie)

- **EN IEC 61326-1:2021**
- **EN 55032:2015/A11:2020+A1:2021**
- **EN 61000-3-2:2019/A1:2021**
- **ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)**
- **ETSI EN 301 489-17 V3.2.1 (2020-09)**

NSE PRODUCTS EUROPE BV - DE VINCILAAN 9 - 1930 ZAVENTEM - BELGIË - ONDERNEMINGSNUMMER: 0550.660.977 - RPR BRUSSEL
TEL +32 (0) 2 757 77 61 - FAX +32 (0) 2 757 77 77 - VAT: BE 0550.660.977 - WWW.NUSKINEUROPE.COM

NU SKIN
ARTISTRY THAT WORKS WITH SCIENCE™

Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der Funkgeräterichtlinie)

- **ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)**

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und ihre Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863

- **EN IEC63321-2-1:2013**
- **EN IEC63321-2-2:2013**
- **EN IEC63321-7-1:2016**
- **EN IEC63321-7-2:2017**
- **EN IEC63321-4:2013/AMD1:2017**
- **EN IEC63321-6:2015**
- **EN IEC63321-8:2017**

Die Technische Dokumentation wird aufbewahrt in:

NSE Products Europe BV, De Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgium.

Die bevollmächtigte Person mit Sitz innerhalb der Gemeinschaft ist: Michiel Sinot, President Europe & Africa

Datum der Ausfertigung: 11. September 2025
Ort der Ausfertigung: Zaventem, Belgien

Michiel Sinot
President Europe & Africa

NSE PRODUCTS EUROPE BV - DE VINCILAAN 9 - 1930 ZAVENTEM - BELGIË - ONDERNEMINGSNUMMER: 0550.660.977 - RPR BRUSSEL
TEL +32 (0) 2 757 77 61 - FAX +32 (0) 2 757 77 77 - VAT: BE 0550.660.977 - WWW.NUSKINEUROPE.COM